

# DOLOMITE *LEGACY, OPAL 2000, MAXI*



  
Do not use as a wheel-  
chair or transport chair.



## **OPERATING INSTRUCTIONS**

Study the operating instructions carefully before use.  
The walker is suitable for use both indoors and outdoors.

## SAFETY

- Do not use as a wheelchair or transport chair.
- Do not under any circumstances stand on the walker.
- Use seat for stationary seating only. Never sit and push with your feet.
- Do not go up or down stairs or use on escalator.
- Both brakes must be in the parking position when the walker is used as a seat.
- The walker must be fully unfolded when used as walking support. N.B. The walker may only be used as a walking support.
- Be extra careful when using the walker on a sloping surface.
- Be extra careful when carrying heavy loads in the basket. Loads may only be carried in the basket or on the tray. Max load on tray 11 lbs. (5 kg).

## ACCESSORIES

- A) Mounting of basket.
- B) Secure the tray using the plastic plugs.
- C) Curb climber

## FOLDING SEAT

The seat can be folded up to provide a larger walking space, and in order to increase accessibility.

## FOLDING


- A) **DOLOMITE LEGACY**  
To fold, lift up handle.

- B) **DOLOMITE OPAL 2000, MAXI**
  1. Lift up the safety latch.
  2. Start the handle to fold the walker.  
Folded position.

- C) When folded the walker is easy to lift and carry.

## OPERATING POSITION


To reset to walking position, press firmly downwards on the seat until a clicking sound is heard.

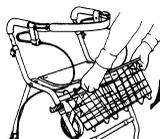




A




B

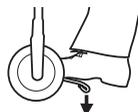

C

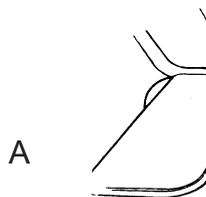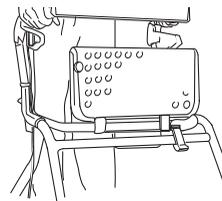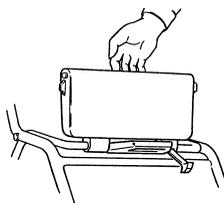

A

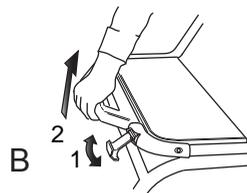

B



C

## BRAKES

Apply the brakes by pulling **both** brake-handles upwards.

## PARKING BRAKE

Press down carefully for parking brake. A clear sound is heard when the brake is placed in correct position. N.b. Always place both brakes in parking position. Pull upwards to loosen the brake.

**Both** brakes must be in the parking position when the walker is used as a seat.

## ADJUSTMENT OF BRAKE EFFECT

For desirable braking strength, adjust the brake wire.

Suitable tools 1x8 mm and 1x10 mm spanner (not included).

## HANDLEBARS

To adjust the handle to a suitable height, stand behind the walker with shoulders level. The handles should be at the same height as the user's wrist. A therapist may suggest different handle heights to accommodate the special needs of a user.

### DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000






#### For adjustment of handles with holes:

Loosen the knob completely, remove the screw. Adjust the handle to suitable height. Fix the screw into the hexagonal hole and fasten the knob properly.

### DOLOMITE MAXI

#### For staples adjustment:

Loosen the wing, adjust the handle to suitable height and tighten the wing properly.

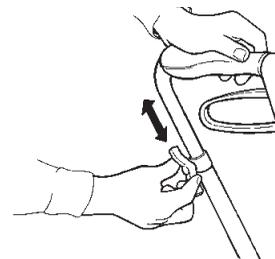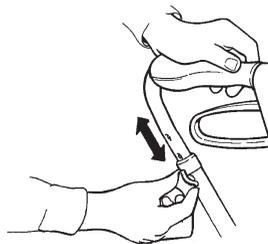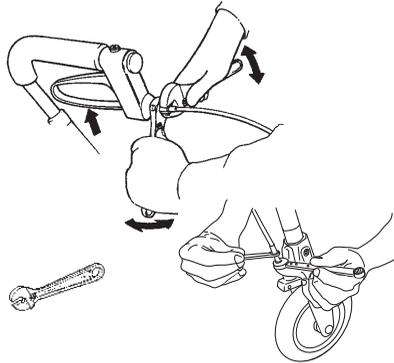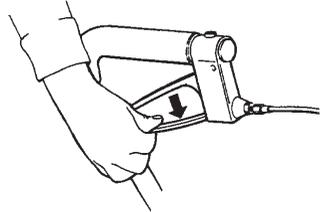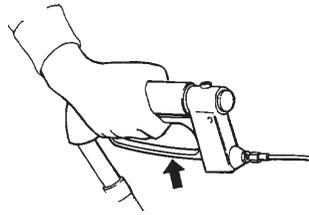

## MAINTENANCE – SAFETY

To ensure good performance and safety you should regularly check that the following is carried out:

- Clean the rollator with solvent-free household cleaner. Keep the wheels clean.
- **Ensure that screws and adjustments** are properly tightened.
- **Immediately contact the nearest dealer if a fault should appear. Never use a defective walker.** Do not attempt repairs yourself!


**N.B. Your walker should only be used as a walking aid! User's max. weight: DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000 275 lbs. (125 kg, 20 stones). DOLOMITE MAXI 352 lbs. (160 kg, 25 stones) DOLOMITE HCP/DOLOMITE will not accept responsibility for adaptations, faulty repairs etc that are outside their control.**

### INSTRUCTIONS FOR DESTRUCTION OF PRODUCT AND PACKAGING:

When the product can no longer be used, it and its accessories, together with packaging material, should be sorted properly. The individual parts can be separated and handled according to the materials description.

The label on the **DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000** and **MAXI** provides all important technical information.

- 1: Article number
- 2: Product name
- 3: Serial number
- 4: Date of manufacture
- 5: Maximum user weight
- 6: NB: read the operating instructions
- 7: Manufacturer's contact information.

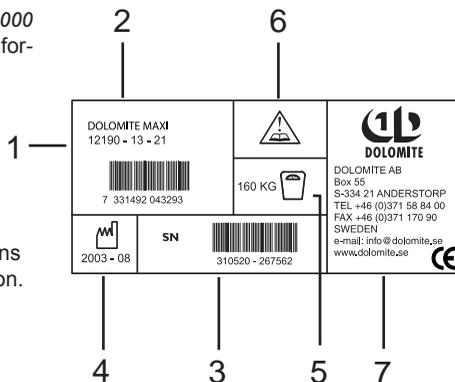

DOLOMITE AB, Box 55, SE-334 21 ANDERSTORP, SWEDEN  
TEL +46 (0)371 58 84 00, FAX +46(0)371 170 90  
E-mail: info@dolomite.se, www.dolomite.se

# DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000, MAXI



  
Ne pas utiliser comme  
chaise roulante ou comme  
siège de transport.



## MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. Ce déambulateur est adapté pour l'utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## ENTRETIEN - SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le déambulateur comme chaise roulante ou chaise de transport.
  - Ne vous mettez sous aucun prétexte debout sur le déambulateur.
  - Utilisez le siège uniquement lors du stationnement. Ne poussez pas avec les pieds lorsque vous êtes assis sur le déambulateur.
  - N'utilisez jamais le siège dans des escaliers ou des escaliers roulants.
  - Les deux freins doivent être en position de stationnement lorsque vous utilisez le siège.
  - Le déambulateur doit être totalement déplié lorsqu'il est utilisé comme aide à la marche.
- ATTENTION ! Le déambulateur doit être utilisé uniquement comme aide à la marche.
- Soyez particulièrement prudent en terrain oblique.
  - Soyez particulièrement prudent lorsque le panier est lourdement chargé. Tout chargement doit être placé dans le panier ou sur le plateau. Le poids maximum de chargement du panier est de 5 kg.

## ACCESSOIRES

- A) Installation du panier.
- B) Mise en place du plateau à l'aide des goupilles de plastique.
- C) Aide à la marche.

## REPLIAGE DU SIÈGE

Le siège peut être replié pour laisser plus de place pour marcher et pour faciliter l'accessibilité.

## REPLIAGE

### A) **DOLOMITE LEGACY**

Pour le repliage, soulevez la poignée vers le haut.


### B) **DOLOMITE OPAL 2000, MAXI**

1. Soulevez le taquet de sécurité.
2. Actionnez la poignée pour replier le déambulateur. Position repliée.

C) Lorsque le déambulateur est replié, il est facile à soulever et à porter.

## MISE EN SERVICE

Pour le remettre en position de marche, appuyez fermement vers le bas sur le siège jusqu'à ce que vous entendiez un cliquetis.

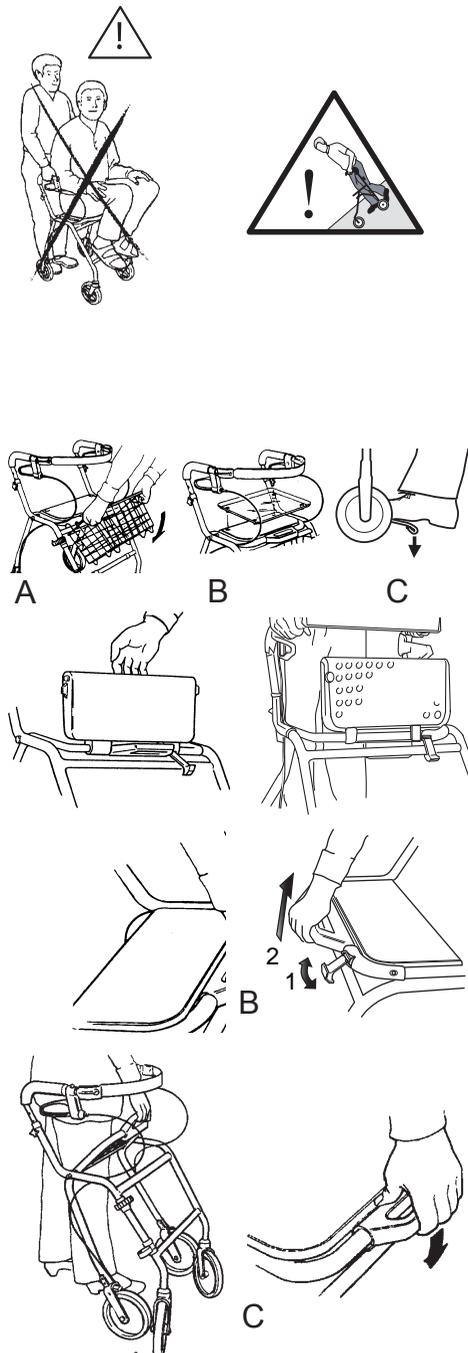

## FREINS

Utilisez les freins en tirant vers le haut les deux poignées.

## FREIN DE STATIONNEMENT

Appuyez doucement vers le bas pour obtenir la position de stationnement. Un clic distinct signale que le frein est en position correcte. Attention : il est important de placer **les deux** freins en position de stationnement. Pour relâcher le frein de stationnement, tirez vers le haut.

Lorsque le déambulateur est utilisé comme siège, les deux freins doivent être en position de stationnement.

## RÉGLAGE DE LA PUISSANCE DES FREINS

Si le freinage est déficient, réglez le câble de frein. L'outil utilisé est une clé de 1x8 mm et de 1x10 mm (non fournie).

## POIGNÉES

Pour régler les poignées en hauteur, placez-vous derrière le déambulateur avec les épaules à hauteurs égales. Les poignées doivent se trouver à la hauteur du poignet de l'utilisateur. Un thérapeute peut suggérer différentes hauteurs de poignées pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

### DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000


#### Pour le réglage des poignées à trous:

Desserrez complètement le bouton, enlevez la vis, Réglez la poignée à la hauteur désirée. Fixez la vis dans le trou hexagonal et fixez le bouton convenablement.

### DOLOMITE MAXI

#### Pour le réglage continu:

Desserrez l'ailette réglez la poignée à la hauteur désirée et serrez convenablement l'ailette.

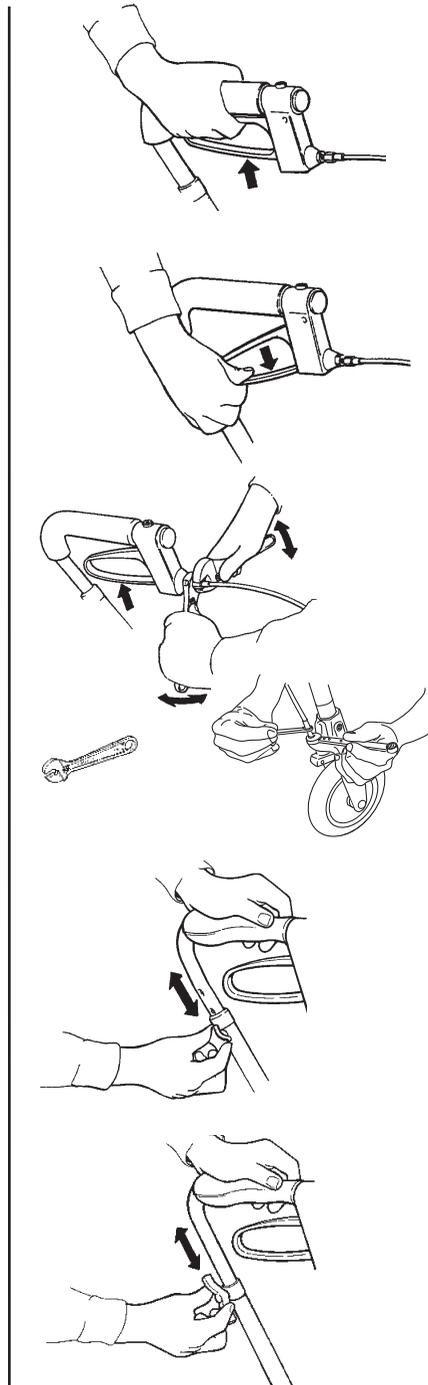

## ENTRETIEN - SÉCURITÉ

Pour maintenir un fonctionnement et une sécurité satisfaisants, vous devez veiller régulièrement à ce que les mesures suivantes soient effectuées :

- Nettoyez le déambulateur avec des produits de nettoyage exempts de solvants. Maintenez les roues propres.
- **Veillez à ce que les vis et les réglages soient bien serrés.**
- **Si le fonctionnement de votre déambulateur n'est pas parfait, prenez immédiatement contact avec le concessionnaire le plus proche. N'utilisez jamais un déambulateur en mauvais état.**


**Attention : utilisez votre déambulateur uniquement comme aide à la marche! Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg pour DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000 160 kg pour DOLOMITE MAXI. DOLOMITE se dégage de toute responsabilité pour toute intervention effectuée sur le déambulateur (adaptation, réparations inadéquates) sans son accord.**

## INSTRUCTIONS POUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE:

Lorsque le produit arrive en fin d'utilisation, il doit, ainsi que ses accessoires, être trié correctement. Il est possible de démonter l'appareil et de disposer des pièces conformément à la liste des matériaux.

L'étiquette du **DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000** et **MAXI** présente toutes les informations techniques importantes.

1. No. d'article
2. Nom du produit
3. No. de série
4. Date de fabrication
5. Poids maximum d'utilisation
6. ATTENTION ! Voir mode d'emploi
7. Nom du fabricant

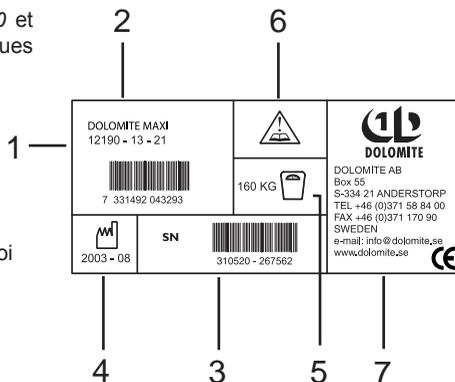

DOLOMITE AB, Box 55, SE-334 21 ANDERSTORP, SUÈDE,  
Téléphone 0046 371 588400, Télécopie 0046 371 170 90  
Courrier électronique : [info@dolomite.se](mailto:info@dolomite.se), Site électronique : [www.dolomite.se](http://www.dolomite.se)